

# SEGUFIX®-Verlängerungsgurte



Art. 3240 - 3244  
 Art. 3340 - 3344  
 Art. 3440 - 3444



Art. 3144

**Bestehend aus:**  
 1 SEGUFIX®-Verlängerungsgurt  
 1 SEGUFIX®-Schloss  
 1 SEGUFIX®-Schlüssel

**Versionen:** Grundauführung / r



Art. 3745

**Bestehend aus:**  
 1 SEGUFIX®-Verlängerungsgurt  
 mit Schnappverschluss

## 3 Varianten → SEGUFIX®-Schlösser:

1206 / 1208	1306 / 1307	1406 / 1407
Art. 3240-3244	Art. 3340-3344	Art. 3440-3444

**Einzelteile:** Art. 3140 - 3144  
 (ohne Schloss und Schlüssel)



Die SEGUFIX®-Verlängerungsgurte (blaues Etikett) bestehen aus einem Baumwoll-/Zellwollgemisch.

# SEGUFIX®-Beinbügelgurt



Art. 3110/r

**Bestehend aus:**  
 1 SEGUFIX®-Beinbügelgurt  
 (ohne Schloss und Schlüssel)



Der SEGUFIX®-Beinbügelgurt (grünes Etikett) besteht aus einem Baumwoll-/Zellwollgemisch.

Inhaltsverzeichnis	Seite
SEGUFIX®-Verlängerungsgurte – Gebrauchsanweisung	2 - 4
SEGUFIX®-Beinbügelgurt – Gebrauchsanweisung	5
Übersicht Tabelle: alle Ausführungen, Größen, Maße und Gewichte	3 - 5
SEGUFIX®-Verschluss-Systeme	6 - 7
SEGUFIX®-Sicherheits- und Warnhinweise	8 - 11
Pflegeanleitung, Impressum	12

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung	
Art.-Nr. / Version	Produktmerkmale
...	Grundauführung
.../r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung

3 Schloßvarianten:

**Art. 3240 - 3244** (mit SEGUFIX®-Magnetschloß-System schwarz)

**Art. 3340 - 3344** (mit SEGUFIX®-Dreh-Patentschloß-System grün)

**Art. 3440 - 3444** (mit Steckschloß-System)

## Verwendungszweck:

- verlängert Befestigungsgurte für die Anbringung an breiten Betten oder Rückenlehnen
- nicht geeignet für die Veränderung von Größen (z. B. Bauchgurt)

## Gebrauchsanweisung für

**Art. 3240 / 3241 / 3242 / 3243 / 3244**

**Art. 3340 / 3341 / 3342 / 3343 / 3344**


**Art. 3440 / 3441 / 3442 / 3443 / 3444**

**Art. 3140 / 3141 / 3142 / 3143 / 3144** (Einzelteile)

für Schloßer und Schlüssel siehe Seite 6 und 7

## Verlängern von geeigneten Gurten des SEGUFIX®-Systems:


- Den Verlängerungsgurt und den zu verlängernden Gurt Öse auf Öse übereinander legen.
- Sockel des Schloßes (1) durch beide Ösen stecken.
- Das Schloß (1) schließen.
- Am Schloß ziehen, um den sicheren Halt zu überprüfen.

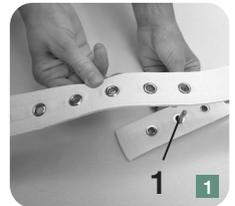

## Lösen der SEGUFIX®-Verlängerungsgurte:

Das Öffnen der jeweiligen Schloß-Systeme ist auf Seite 7 beschrieben.

- Das Schloß (1) öffnen und den Gurt vom Sockel ziehen.

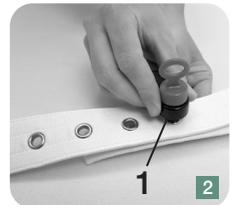


**Beachten Sie die SEGUFIX®-Sicherheits- und Warnhinweise auf Seite 8 - 11**

**WARNUNG:** Vor Benutzung der SEGUFIX®-Verlängerungsgurte die Sicherheitshinweise lesen.

- Die SEGUFIX®-Verlängerungsgurte sind nicht geeignet für die Veränderung von Größen (z. B. Bauchgurt).
- Weitere Produktinformationen unter [www.segufix.com](http://www.segufix.com) oder [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)




**Art. 3240 / 3340 / 3440 und 3140**  
 12 Ösen, **mit** Sockeltasche  
 2 Metallschlaufen

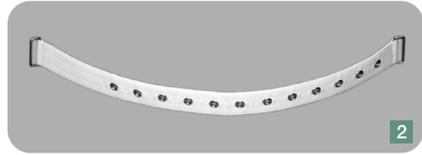


**Art. 3241 / 3341 / 3441 und 3141**  
 12 Ösen, **ohne** Sockeltasche  
 2 Metallschlaufen



**Art. 3242 / 3342 / 3442 und 3142**  
 12 Ösen, **mit** Sockeltasche  
 1 Metallschleufe

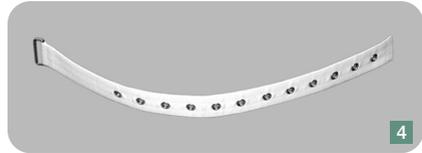

**Art. 3243 / 3343 / 3443 und 3143**  
 12 Ösen, **ohne** Sockeltasche  
 1 Metallschleufe

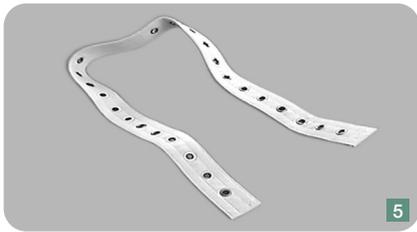

**Art. 3244 / 3344 / 3444 und 3144**  
 26 Ösen, **ohne** Sockeltasche  
**ohne** Metallschleufe

SEGUFIX®-Verlängerungsgurte								Gurt- breite	Gesamt- länge
Art.	kg	Art.	kg	Art.	kg	Einzelteil	kg	mm	mm
3240	0,19	3340	0,21	3440	0,21	3140	0,15	45	650
3240/r	0,24	3340/r	0,22	3440/r	0,22	3140/r	0,16	45	650
3241	0,16	3341	0,18	3441	0,18	3141	0,12	45	650
3241/r	0,23	3341/r	0,19	3441/r	0,19	3141/r	0,13	45	650
3242	0,23	3342	0,20	3442	0,20	3142	0,14	45	650
3242/r	0,19	3342/r	0,21	3442/r	0,21	3142/r	0,15	45	650
3243	0,20	3343	0,17	3443	0,17	3143	0,11	45	650
3243/r	0,22	3343/r	0,24	3443/r	0,24	3143/r	0,18	45	650
3244	0,26	3344	0,23	3444	0,23	3144	0,17	45	1200
3244/r	0,29	3344/r	0,26	3444/r	0,26	3144/r	0,20	45	1200

Tabelle: ca. Maße und Produktgewichte – bis zu 8 % Schrumpfung möglich  
 (Gurte sind nicht vorgewaschen)

## Art. 3745

### Verwendungszweck:

- verlängert Befestigungsgurte von SEGUFIX®-Sitzgurten mit Schnappverschluss
- nur zu verwenden mit Produkten mit Schnappverschluss
- für die Anbringung an breiteren Rückenlehnen




## Gebrauchsanweisung für Art. 3745

Der Verlängerungsgurt mit Schnappverschluss wird als Verbindungsstück zwischen den Befestigungsgurten des Sitzgurtes angewendet. Geeignet für die Verlängerung von SEGUFIX®-Sitzgurt Klett, Sitzgurt, Sitzgurt mit Schrittgurt und Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten.

### Verlängern der Befestigungsgurte mit Schnappverschluss:

- Vor dem Anbringen an der Sitzgelegenheit die jeweiligen Enden der Schnappverschlüsse (Sitzgurt und Verlängerungsgurt) hinter der Rückenlehne einrasten lassen und die Gurte straff ziehen.
- Der Sitzgurt muss fest an der Rückenlehne angebracht werden und darf nicht verrutschen.
- Überprüfen, ob die Schnappverschlüsse eingerastet sind und sich nicht mehr auseinander ziehen lassen.

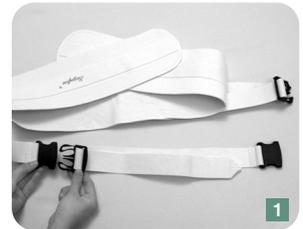

### Lösen der Gurte:

- Die Schnappverschlüsse öffnen und die Gurte voneinander lösen.

### Beachten Sie die SEGUFIX®-Sicherheits- und Warnhinweise auf Seite 8 - 11

Gesamtlänge	Breite	Gewicht
800 mm	45 mm	0,09 kg


Tabelle: ca. Maße und Produktgewichte – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

**WARNUNG:** Vor Benutzung der SEGUFIX®-Verlängerungsgurte die Sicherheitshinweise lesen.

- Der Schnappverschluss ist bis 70 kg belastbar.

### Einfädeln des Schnappverschlusses:


- Den Schnappverschluss so halten, dass die Haken zum Einrasten zum anderen Teil des Verschlusses zeigen.
- Den Gurt zwischen Haken und Mittelsteg von unten nach oben führen, dann über den Mittelsteg und durch die zweite Öffnung nach unten ziehen.
- Schnappverschluss in die gewünschte Position schieben.

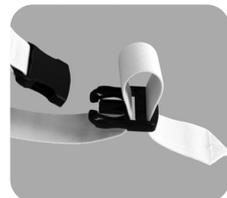

## Art. 3110/r

### Verwendungszweck:

- zusätzliche Bewegungseinschränkung der Beine in Kombination mit der SEGUFIX®-Fußhalterung, SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung oder SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

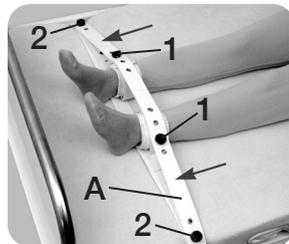

## Gebrauchsanweisung für Art. 3110/r

für Schloss und Schlüssel siehe Seite 6 und 7

### Befestigen des SEGUFIX®-Beinbügelgurt am Patienten:

Befestigen Sie zuerst die SEGUFIX®-Fußhalterung, Oberschenkelhalterung oder Akut-Fixierung-Fuß am Bett und am Patienten. Die genaue Anleitung dazu finden Sie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.

- Die Schlösser (1) der Fußhalterung, Oberschenkelhalterung oder Akut-Fixierung-Fuß öffnen.
- Den Beinbügelgurt (A) mit den mittleren Ösen auf die Sockel der Schlösser (1) legen.
- Die Schlösser (1) schließen.
- Nun die Schlösser (2) öffnen.
- Den Beinbügelgurt (A) mit den äußeren Ösen auf die Sockel der Schlösser (2) legen.
- Die Schlösser (2) schließen.
- Der Beinbügelgurt muss fest angezogen sein, ohne die Blutzirkulation zu behindern.
- An allen Schlössern ziehen, um den sicheren Halt zu überprüfen, die Bettgitter hochstellen.

### Lösen und Entfernen des Beinbügelgurt vom Patienten:

Das Öffnen der jeweiligen Schloss-Systeme ist auf Seite 7 beschrieben.

- Die Schlösser (2 und 1) öffnen und den Gurt von den Sockeln ziehen.
- Nun die Schlösser (1 und 2) wieder schließen und den Gurt vom Bett entfernen.

## Beachten Sie die SEGUFIX®-Sicherheits- und Warnhinweise auf Seite 8 - 11

**WARNUNG:** Vor Benutzung des SEGUFIX®-Beinbügelgurt die Sicherheitshinweise lesen.

- Bei Verwendung kompatibler Produkte in der verstärkten Ausführung wird für die Befestigung des Beinbügelgurt am Befestigungsgurt an beiden Seiten ein zusätzliches Schloss benötigt, da sonst zu viele Gurtlagen übereinander liegen.
- Zum Entfernen des SEGUFIX®-Beinbügelgurt müssen zunächst die beiden äußeren SEGUFIX®-Schlösser (2) geöffnet werden, weil sonst die SEGUFIX®-Schlösser (1) unter Zug stehen und sich nur schwer öffnen lassen.
- Weitere Produktinformationen unter [www.segufix.com](http://www.segufix.com) oder [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)

Gesamtlänge	Breite	Gewicht
1240 mm	45 mm	0,19 kg

Tabelle: ca. Maße und Produktgewichte – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)



## SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz

Artikel	Bestehend aus:
1206	1 Magnetknopf schwarz / segufix.com 1 Metallsockel
1208	1 Magnetschlüssel rot
1204	1 Magnetknopf schwarz / segufix.com
1205	1 Metallsockel
1209	1 Magnetschlüssel rot mit Anhänger



## SEGUFIX®-Dreh-Magnetschloss-System grün

Artikel	Bestehend aus:
1306	1 Dreh-Magnetknopf grün 1 Vierkantsockel
1307	1 Dreh-Magnetschlüssel gelb
1304	1 Dreh-Magnetknopf grün
1305	1 Vierkantsockel

### Verwendungszweck Schloss:

Zum sicheren Verschließen der SEGUFIX®-Systeme.

### Verwendungszweck Schlüssel:

Zum schnellen Öffnen der Schlösser.

### Wichtig:

Die Verschluss-Systeme funktionieren nur mit den dazu gehörigen Komponenten. Sie sind nicht mit Komponenten anderer Schloss-Systeme austauschbar.



## Steckschloss-System

Artikel	Bestehend aus:
1406	1 Steckknopf 1 Stecksockel
1407	1 Steckschlüssel
1404	1 Steckknopf
1405	1 Stecksockel

**WARNUNG:** Vor Benutzung der Verschluss-Systeme die Sicherheitshinweise lesen.

- Schlösser nicht in Flüssigkeit tauchen, da diese sonst nicht mehr funktionieren.
- Schlösser und Schlüssel dürfen nicht mitgewaschen werden.
- Vor jeder Benutzung das Schloss auf Funktion überprüfen.
- Sockel am Kopf auf Beschädigung überprüfen (Verschleiß, Abrundungen, Stauchung).
- Beim Verschließen des Schlosses muss der Knopf auf dem Sockel einrasten, er darf sich nicht mehr abziehen lassen.
- Für das Öffnen der Schlösser muss die Beweglichkeit zwischen oberem und unterem Anschlagpunkt des Knopfes sicher gestellt sein (Art. 1206), deshalb dürfen pro Schloss maximal 4 Gurtlagen verwendet werden.  
(Ausnahme: Produkte mit „r“ oder „f“ in der Artikelbezeichnung haben dickere Gurte, bei diesen Gurten maximal 3 Gurtlagen verwenden!)
- Bei Verwendung des Dreh-Magnetschlusses (Art. 1306) dürfen maximal 4 Gurtlagen verwendet werden, beim Steckschloss (Art. 1406) grundsätzlich nur 3 Gurtlagen.
- Sollten beschädigte Schlösser nicht mehr mit dem Schlüssel zu öffnen sein, können Gurte mit Schere oder Gurtschneider durchgeschnitten werden.

- Weitere Produktinformationen unter [www.segufix.com](http://www.segufix.com) oder [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)

## Gebrauchsanweisung für die SEGUFIX®-Verschluss-Systeme:

**Art. 1206 / 1208** (SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz)

**Art. 1306 / 1307** (SEGUFIX®-Dreh-Magnetschloss-System grün)

**Art. 1406 / 1407** (Steckschloss-System)

### Öffnen der Schlösser:

#### Art. 1206 / 1208

- Den roten Magnetschlüssel mit einem leichten Stoß auf das schwarze Magnetschloss setzen.
- Magnetschlüssel samt Magnetknopf vom Metallsockel abnehmen (Abb. 1).



#### Art. 1306 / 1307

- Den gelben Dreh-Magnetschlüssel auf das grüne Dreh-Magnetschloss setzen.
- Dreh-Magnetschloss mit Dreh-Magnetschlüssel durch Drehung entriegeln. Dreh-Magnetschlüssel samt Dreh-Magnetknopf vom Vierkantsockel abnehmen (Abb. 3).



#### Art. 1406 / 1407

- Den Steckschlüssel in die Öffnungen des Steckknopfes zum Entriegeln drücken.
- Steckschlüssel samt Steckknopf vom Stecksockel abnehmen (Abb. 2).



### Schließen der Schlösser:

- Den jeweiligen Knopf mit der Öffnung auf dem dazugehörigen Sockel einrasten lassen.
- Schließkontrolle: Der Knopf darf sich nicht vom Sockel abziehen lassen.

**Wichtig:** Die Verschluss-Systeme funktionieren nur mit den dazu gehörigen Komponenten. Sie sind nicht mit Komponenten anderer Schloss-Systeme austauschbar.

**Beachten Sie die SEGUFIX®-Sicherheits- und Warnhinweise auf Seite 8 - 11**

Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen sind nur gültig für Original-SEGUFIX®-Produkte. Benutzen Sie das SEGUFIX®-System nicht, bevor Sie die Gebrauchsanweisungen gelesen und verstanden haben.

Nur aktuelle Gebrauchsanweisungen verwenden und diese sicher und griffbereit verwahren. Produkt und Gebrauchsanweisung müssen übereinstimmen. Fehlerhafte Anwendung des SEGUFIX®-Systems kann ernsthafte Verletzungen zur Folge haben, auch mit tödlichem Ausgang. Die Sicherheit Ihres Patienten hängt davon ab, dass Sie das SEGUFIX®-System korrekt anwenden.

## 1. Anwendungsvoraussetzungen

Die Einhaltung der Betreiberpflichten entsprechend den nationalen gesetzlichen Bestimmungen obliegt der anwendenden Organisation. Beachten Sie immer die Fixierungsvorschriften Ihres Arbeitsplatzes, das hausinterne Fixierungsprotokoll und die aktuelle Gesetzgebung Ihres Bundeslandes. Die Gebrauchsanweisungen sind einzuhalten.

SEGUFIX®-Produkte dürfen nur von Personen angewendet werden, die dafür die erforderliche Ausbildung oder Kenntnis besitzen. Gesetzliche Bestimmungen und ärztliche Anordnungen sind strikt einzuhalten! Der verordnende Arzt muss sich versichern, dass der Gesundheitszustand des Patienten die Anwendung des SEGUFIX®-Systems zulässt. Auf relevante allergische Dispositionen achten.

## 2. Verwendungszweck

SEGUFIX®-Produkte dürfen ausschließlich für die bestimmungsgemäßen medizinischen Verwendungszwecke benutzt werden.

## 3. Nur Original SEGUFIX®-Produkte benutzen

Aus sicherheitstechnischen Gründen dürfen SEGUFIX®-Produkte nicht verändert oder mit Fremdprodukten kombiniert werden. Bei Nichtbeachtung erlöschen Gewährleistungs- und Garantieansprüche.

## 4. Gefährliche Gegenstände entfernen

Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Nähe des Patienten, die zu einer Selbstverletzung führen können, oder mit denen der Patient die Gurte beschädigen kann (z. B. Brille, Schmuck, scharfe Gegenstände).

## 5. Überprüfung der Gurtsysteme vor jeder Benutzung



Vor Benutzung muss das Produkt auf schadhafte Nähte, abgerissene Teile und beschädigte Ösen untersucht werden. Schadhafte Produkte können die Funktion beeinträchtigen und zu Verletzungen führen. Benutzen Sie kein Produkt, das Beschädigungen aufweist.



## 6. Schlösser dürfen beim Öffnen nicht unter Zug stehen

Für das Öffnen der Schlösser muss die Beweglichkeit zwischen oberem und unterem Anschlagpunkt des Knopfes sicher gestellt sein (Art. 1206). Deshalb dürfen pro Schloss maximal 4 Gurtlagen verwendet werden (Ausnahme: Produkte mit „r“ oder „f“ in der Artikelbezeichnung haben dickere Gurte. Bei diesen Gurten sind maximal 3 Gurtlagen zu verwenden!). Bei Verwendung des Dreh-Magnetschlösses (Art. 1307) dürfen maximal 4 Gurtlagen verwendet werden, beim Steckschloss (Art. 1407) grundsätzlich nur 3 Gurtlagen verwenden.

## 7. Benutzen Sie die Seitenbefestigungen

Die SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt oder Oberschenkelmanschetten nicht ohne angebrachte Seitenbefestigungen anwenden. Ohne Seitenbefestigungen kann der Patient mit dem Bauchgurt rotieren oder über den Bettrand rutschen, mit der möglichen Folge der Kompression des Brustkorbs und möglicher Todesfolge.

Falls Patienten auch bei angebrachten Seitenbefestigungen und hochgestellten Bettgittern über den Bettrand gelangen, müssen in diesen Fällen zusätzliche Fixierungsmaßnahmen erfolgen.

Wichtig: Führen Sie die Seitenbefestigungen – vor dem Festmachen – durch die jeweiligen Schlaufen auf dem breiten Bettgurt (siehe Gebrauchsanweisung).

## 8. Bei Betten, Sitzgelegenheiten und Tragen ist zu beachten


- SEGUFIX®-Produkte nur mit Betten, standfesten Sitzgelegenheiten bzw. Tragen verwenden, die eine Anbringung gemäß Gebrauchsanweisung erlauben.
- Die Produkte müssen so angebracht werden, dass sie nicht verrutschen können.
- Befestigungsgurte und Bewegungsmechanismus von Betten, Matratzen, Wechseldruckmatratzen o. ä., Tragen oder Sitzgelegenheiten können sich gegenseitig beeinträchtigen, mit der Folge von Beschädigungen, Funktionsbeeinträchtigungen und Verletzungsgefahr.
- Die ausgewählten Haltepunkte dürfen keine scharfen Kanten aufweisen.
- SEGUFIX®-Produkte verhindern nicht das Umkippen oder Wegrollen von Betten, Sitzgelegenheiten und Tragen.

Hilfreich in diesem Zusammenhang:

Normen für Betten: DIN EN 60601-2-52

Normen für Rollstühle: DIN EN 12182 und DIN EN 12183

## 9. Bettgitter müssen hochgestellt sein

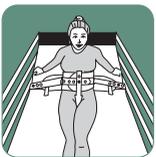

Um Unfälle bei der Fixierung zu vermeiden, sind die Bettgitter hochzustellen (Ausnahme: 5-Punkt Fixierung).

Achtung: Bei geteilten Bettgittern ist ein „Gap protector“ (Einsteckscheiben), der ein Hindurchrutschen des Patienten verhindert, zu verwenden.

Bei geteilten Bettgittern kann es sonst vorkommen, dass der Patient trotz angelegter Fixierung durch die vorhandene Öffnung hindurchrutscht – mit der möglichen Folge der Kompression des Brustkorbs.



## 10. Patienten in Fixierung überwachen

Patienten in Fixierung erfordern regelmäßige Überwachung. Aggressive, aufgebrachte und unruhige Patienten oder solche, bei denen die Gefahr der Aspiration besteht, erfordern eine ununterbrochene Überwachung.

## 11. Überprüfung der Verschluss-Systeme vor jeder Benutzung



SEGUFIX®-Magnetschlösser schwarz/segufix.com, SEGUFIX®-Dreh-Magnetschlösser grün, Steckschlösser, Schnapp-, Klett- und Metallschlaufenverschlüsse auf Funktion und sicheren Halt prüfen. Schlösser nicht in Flüssigkeit tauchen! Dies kann zu Fehlfunktion führen. Sind beschädigte Schlösser nicht mehr mit dem Schlüssel zu öffnen, können Gurte mit Schere oder Gurtschneider durchgeschnitten werden. Den Sockelkopf auf Verschleiß (Abrundung/Stauchung) überprüfen.

## 12. Warnhinweis Herzschrittmacher



Bei Patienten mit Herzschrittmacher muss ein Sicherheitsabstand von 10 cm zwischen Herzschrittmacher und magnetischen Schlössern/Schlüsseln eingehalten werden, da sonst die Funktion beeinträchtigt werden kann und z. B. bei dem Patienten Tachykardien ausgelöst werden könnten (alternativ: Steckschloss verwenden). Bezüglich möglicher Beeinträchtigung anderer Patienten-Implantate durch starke Magnete bitte die jeweiligen

Herstellerangaben beachten.

## 13. Befestigung der Gurte überprüfen

Die korrekte Befestigung der Gurte regelmäßig überprüfen. Die Gurte müssen straff am beweglichen Kopf- oder Fußteil angebracht werden. Wenn kein bewegliches Kopf- oder Fußteil vorhanden ist, am Bettrahmen befestigen. Die Gurte dürfen nicht verrutschen.

## 14. Benutzung des SEGUFIX®-Systems in Fahrzeugen



In Automobilen ersetzen SEGUFIX®-Transportgurte nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsgurte (Dreipunkt-/Beckengurt). Transportgurte dürfen nur als zusätzliche Stützung oder Fixierung des Patienten angebracht werden. Stellen Sie sicher, dass der Patient im Notfall schnell gerettet werden kann (gut sichtbar angebrachte und griffbereite Gurtschneider).

## 15. Nicht zu eng, jedoch sicher

Die Fixierung muss eng anliegen, darf aber die Atmung und Blutzirkulation nicht behindern. Zu locker angelegte Produkte können die Sicherheit des Patienten gefährden. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Fixierung.



## 16. Lagerung

Um die Lebensdauer der Produkte zu verlängern, Gurte und Verschluss-Systeme trocken und dunkel bei einem Normalklima von 20 °C lagern.

## 17. Brenneigenschaft des SEGUFIX® -Bettsystems



Nach DIN EN 71-2 Abschnitt 4.3 nicht entflammbar.

Nach DIN 75200 Brenngeschwindigkeit null.

Selbstverständlich dürfen die Produkte nicht mit glühenden Zigaretten in Kontakt kommen oder offenen Flammen ausgesetzt werden, da dies zu nachhaltigen Beschädigungen und Gesundheitsschäden führen kann.

## 18. Immer die richtige Größe wählen

Wählen Sie immer die richtige Größe gemäß der Körper- und Taillenmaße (siehe Größentabelle). Zu große bzw. zu kleine Produkte beeinträchtigen Komfort und Sicherheit des Patienten.

## 19. Entsorgung

- Kartonagen → Altpapier
- Umverpackungen (Folie) → Gelber Sack
- Unbrauchbare Produkte → Restmüll

## 20. Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter:  
[https://www.segufix.com/conformity\\_de.php](https://www.segufix.com/conformity_de.php)

## 21. Gutachterliche Empfehlung zur Unfallvermeidung

(Prof. Dr.-Ing. U. Boenick, TU-Berlin):

1. Seitenbefestigungen anlegen
2. Durchgehende Bettgitter hochstellen (Ausnahme: 5-Punkt-Fixierung)
3. Es kann notwendig sein, weitere Fixierelemente einzusetzen, um ein Entkommen aus dem Bett sicher zu verhindern.

## 22. Wichtig vor jeder Anwendung

- Sicht- und Schließkontrolle der Schlösser
- Sichtkontrolle: Gurte, Ösen, Stoffschlaufen, Klett-, Schnapp- und Metallschlaufenverschlüsse etc.
- Nur bei ausreichender Indikation anwenden
- Gesetzliche Voraussetzungen prüfen

## 23. Schwerwiegende Vorfälle

Schwerwiegende Vorfälle sind der zuständigen Behörde und dem Hersteller zu melden.

- **SEGUFIX®-Bandagengurte** (naturweiß) bestehen aus einem Baumwoll-/Zellwollgemisch und sind bis 95 °C in der Waschmaschine waschbar. Niedrigere Temperaturen und Wäschenetze verlängern die Haltbarkeitsdauer des Produktes.  
Das Gurtmaterial ist nicht für Waschstraßen, Heißmangel und Trockenpressen geeignet (Beschädigung der Ösen möglich). Die Gurte sind nicht vorgewaschen, bis zu 8 % Schrumpfung möglich. Gurte immer trocken lagern.  
Waschmittel: nicht aggressiv, keine Weichspüler, keine Bleiche verwenden.  
Trockner: im Schongang bei niedriger Temperatur und vorzugsweise im Wäschenetz.  
Desinfektion: chemothermisches Desinfektionswaschverfahren möglich (Ziffer 3.1.2 „Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren“). Überdosierungen schädigen das Gurtmaterial.
- **SEGUFIX®-Transportgurte** (farbig/schwarz) bestehen aus Polyester und sind bis zu 30 °C in der Waschmaschine waschbar. Niedrigere Temperaturen und Wäschenetze verlängern die Haltbarkeitsdauer des Produktes.  
Das Gurtmaterial ist nicht für Waschstraßen, Heißmangel und Trockenpressen geeignet (Beschädigung der Ösen möglich). Gurte immer trocken lagern.  
Waschmittel: nicht aggressiv, keine Weichspüler, keine Bleiche verwenden.  
Trockner: im Schongang bei niedriger Temperatur und vorzugsweise im Wäschenetz.
- **SEGUFIX®-Schlösser und Sockel** vor der Wäsche entfernen. Schlösser und Sockel mit einem feuchten Tuch reinigen/desinfizieren, keinesfalls in Flüssigkeit tauchen. Mitgewaschene Schlösser funktionieren nicht oder nicht mehr zuverlässig.
- **Klettverschlüsse** sollten vor dem Waschen und Trocknen im Wäschetrockner geschlossen werden, um den Klettverschluss flusenfrei zu halten.  
Klettverschlüsse nach Bedarf mit harter Bürste von Flusen und Ähnlichem befreien. Auch bei normalem Gebrauch verflusen die Klettverschlüsse nach einiger Zeit. Dies kann die Haltekraft verringern. Vor jedem Gebrauch die Haltekraft überprüfen.
- **Haltbarkeitsdauer**: Sie hängt ab von der Intensität der Nutzung und wird durch sanfte Reinigungsverfahren (Reinigungsmittel/Wäschenetz) verlängert.

20. Auflage · 2024-12

© by SEGUFIX®-Bandagen, 2021

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen:

<https://www.segufix.com/PDFs/AGBs/AGBs.pdf>

Produktänderungen, Abweichungen von den Abbildungen in Farbe und Form, Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Verbreitung über elektronische Systeme/ Datenträger, auch auszugsweise, nur mit

vorheriger ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung.

Bei Anfragen kontaktieren Sie bitte:

## **SEGUFIX®-Bandagen**

Das Humane System GmbH & Co. KG

Allerbeeksring 33 · 21266 Jesteburg  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 41 83 500-0

Telefax: +49 (0) 41 83 500-200

E-mail: [info@segufix.de](mailto:info@segufix.de)

[www.segufix.com](http://www.segufix.com) · [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)